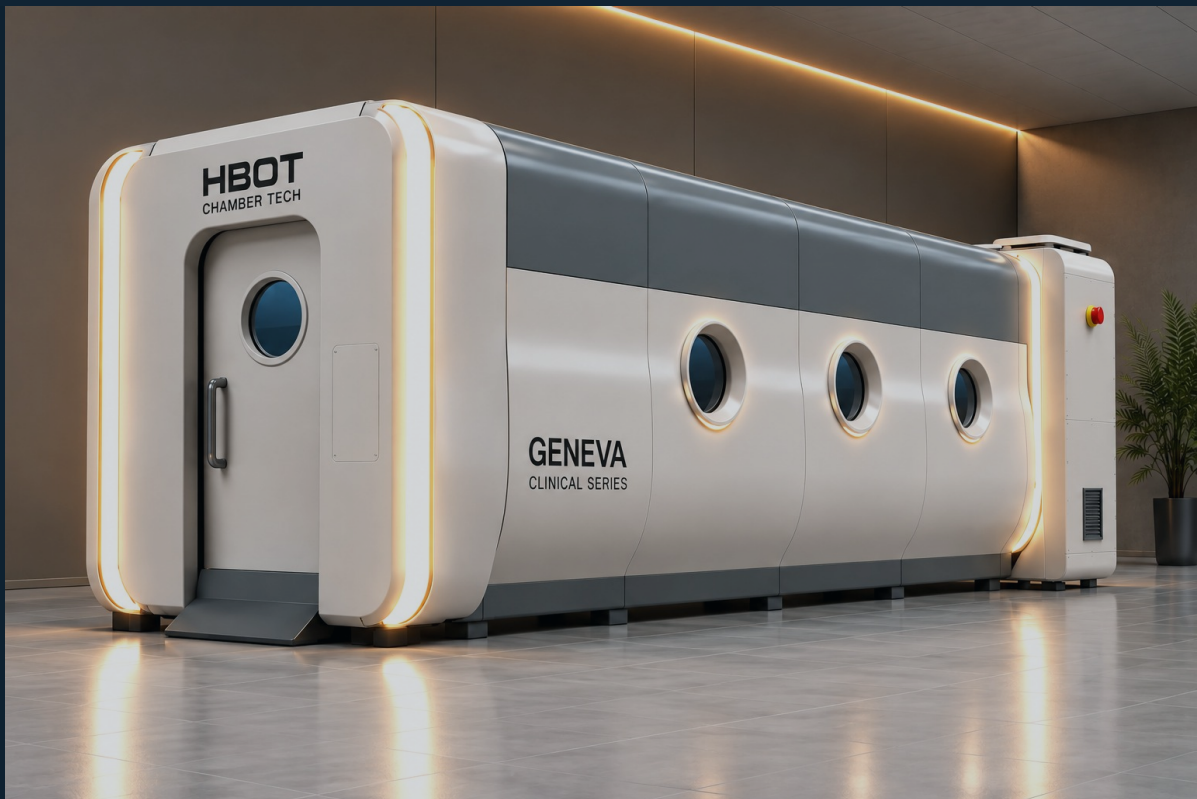




EXPEDIENTE DE MODELO HBOT CITY TECH

GENEVA

Una solución de nivel hospitalario y gran capacidad.

Uso · Seguridad · Instalación · Mantenimiento · City Tech

Información técnica precomercial · Rev. 1.0 · 23 de agosto de 2026

ESTADO DEL DOCUMENTO

Información previa para una planificación fundamentada

Este documento apoya la selección del producto y la planificación. No sustituye las instrucciones finales de uso, el expediente por número de serie, la documentación de conformidad, el plan de instalación ni la formación. En caso de diferencia prevalecen el contrato, el expediente final y las instrucciones del fabricante.

01 · RESUMEN DEL MODELO

Relacione el modelo con su contexto de uso previsto

Una solución de nivel hospitalario y gran capacidad.

Una cámara de nivel hospitalario y gran capacidad para instituciones médicas. Su diseño modular y sus sistemas de monitorización avanzados cubren las necesidades de los centros de tratamiento con mayor actividad.

Elemento técnico	Información publicada
Capacidad	6+ personas (sentadas)
Rango de Presión	3.0 - 6.0 ATA
Pureza de Oxígeno	93-95%
Seguridad	Sistema de válvula de emergencia
Construcción	Nivel hospitalario
Expansión	Preparada para expansión modular
Posición	Sentado
Sistema operativo	CityOS™
Monitorización remota	CityConnect™
Alimentación de respaldo	Estándar
Medición de saturación de oxígeno	Estándar
Precio inicial (EUR, FOB)	259.900 €+

Los valores publicados de presión y rendimiento no constituyen un protocolo clínico. Los valores finales dependen de la configuración, el uso previsto, el mercado y el expediente verificado.

02 · INSTALACIÓN Y USO SEGURO

La seguridad se integra en el lugar, el equipo y el proceso

La instalación y el uso combinan instrucciones del fabricante, operadores formados, vigilancia, prevención de incendios, puesta a tierra, limpieza y mantenimiento programado.

- Cumplir las instrucciones y el uso previsto definido.
- Controlar incendios y materiales en entornos ricos en oxígeno.
- Verificar puesta a tierra, electricidad estática y seguridad eléctrica.
- Mantener formación, vigilancia y procedimientos de emergencia.
- Registrar limpieza, consumibles, intervalos de servicio y controles.

Planificación del lugar y la instalación

- Verifique ruta de entrega, puertas, ascensores, espacios de servicio y evacuación.
- Confirme carga del suelo, anclaje y aptitud estructural.
- Disponga alimentación protegida, puesta a tierra y verificación eléctrica local.
- Documente ventilación, temperatura, humedad y control del enriquecimiento de oxígeno.
- Apruebe prevención de incendios, materiales prohibidos, alarma, evacuación y emergencias antes de la puesta en marcha.

Flujo seguro de sesión

Flujo seguro de sesión

#	Flujo seguro de sesión
1	Asigne un operador autorizado y confirme el uso y la gobernanza clínica.
2	Compruebe identidad, consentimiento, salud, contraindicaciones y contacto de emergencia.
3	Inspeccione puerta, junta, válvulas, sensores, alarma, comunicación, ventilación y gases.
4	Retire fuentes de ignición, aceites, electrónica, tejidos y materiales prohibidos.
5	Explique presión, compensación de oídos, comunicación y solicitud de parada.
6	Supervise continuamente al usuario y el sistema; siga solo un protocolo autorizado.
7	Igualé la presión con seguridad, evalúe al usuario y complete el registro.

Ante una alarma o anomalía, priorice al usuario y finalice la sesión según el procedimiento, las instrucciones del fabricante y la formación del modelo. No vuelva a usar el equipo sin autorización.

03 · EMERGENCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los controles registrados sostienen la seguridad

Frecuencia	Control mínimo	Registro
Antes de cada sesión	Puerta/junta, comunicación, alarmas, válvulas, sensores y área	Lista del operador
Después de cada sesión	Limpieza aprobada, gestión de accesorios y ventilación	Registro de limpieza
Diario	Indicadores, fugas, avisos, ruidos u olores anómalos	Control diario
Programado	Presión, válvulas, calibración, electricidad/tierra y gases	Parte de servicio
Anual / normativo	Equipos a presión, incendio e instalación según país y modelo	Informe técnico

La seguridad se integra en el lugar, el equipo y el proceso

- Cumplir las instrucciones y el uso previsto definido.
- Controlar incendios y materiales en entornos ricos en oxígeno.
- Verificar puesta a tierra, electricidad estática y seguridad eléctrica.
- Mantener formación, vigilancia y procedimientos de emergencia.
- Registrar limpieza, consumibles, intervalos de servicio y controles.

04 · CITY TECH Y GOBERNANZA DE DATOS

Funciones conectadas dentro de un alcance verificado

Componente	Finalidad y alcance
CityConnect™	Visibilidad conectada para usuarios autorizados; las funciones remotas dependen del alcance verificado.
CityOS™	Plataforma de control y software de la cámara; la versión y funciones se indican en la oferta.
CityAI™	Resumen de datos operativos y apoyo a decisiones; no diagnostica ni decide clínicamente de forma autónoma.
CitySync™	Intercambio de datos con sistemas aprobados; interfaces, campos y pruebas se definen por proyecto.
CityGuard™	Apoyo de estado, alertas registradas y mantenimiento para equipos autorizados.

Nota de hoja de ruta

Las integraciones con Apple Health, Google Fit y Huawei Health están en la hoja de ruta y no son funciones estándar actuales.

05 · DOCUMENTACIÓN Y CONFORMIDAD

Cierre la decisión con un paquete documental escrito

El alcance de cada documento se confirma según modelo, configuración, uso previsto y país de destino.

- Identidad del producto y uso previsto
- Paquete de conformidad por modelo y país
- Instrucciones y formación del operador
- Plan de mantenimiento, limpieza y servicio
- Aceptación en fábrica/sitio, instalación y puesta en marcha
- Procedimientos de incendio y emergencia

Declaración regulatoria

El estado regulatorio, la clasificación y la disponibilidad varían según modelo, configuración, uso y país. HBOT Chamber Tech solo declara conformidad para alcances verificados y no utiliza una afirmación general de aprobación de la FDA.

Referencias oficiales de seguridad

[U.S. FDA - Follow Instructions for Safe Use of Hyperbaric Oxygen Therapy Devices](#)

[Undersea & Hyperbaric Medical Society - Accepted HBOT Indications](#)

EXPEDIENTE DEL MODELO Y REUNIÓN DE PROYECTO

sales@hbotchambertech.com www.hbotchambertech.com Tuzla · Istanbul · Türkiye